



SONOPULS 190

Tratamiento fácil y rápido de terapia de ultrasonido.

- *22 protocolos basados en la evidencia*
- *Programable*
- *Inicio extremadamente rápido*
- *Pantalla color de cristal TFT*
- *Interface de usuario de pantalla táctil*
- *Control de contacto*
- *Diseño ergonómico*



SONOPULS 190

El nuevo Sonopuls 190 es rápido y fácil de usar. Un equipo con un inicio extremadamente rápido, un modo eficaz de establecer parámetros de tratamiento y un equipo que da resultados terapéuticos muy rápidos. El diseño ergonómico y compacto del mismo, su panel visor TFT claro y el interface de pantalla táctil, convierte este aparato de tamaño pequeño, en un gran activo para el Terapeuta.

La terapia de Ultrasonido ha sido probada como un tratamiento muy eficaz para numerosas patologías. Con el fin de simplificar la selección del tipo de terapia, se han almacenado un número de protocolos en el Sonopuls 190. Estos protocolos basados en evidencias claras, proporcionan instrucciones claras y establecerán parámetros para el tratamiento de forma automática.

Control de Contacto

Una luz visible de 360 grados para control de contacto. Una clara indicación de la transferencia efectiva de energía que le permitirá conducir sus terapias de una forma eficaz.

Posibilidad de 2 Cabezales de Tratamiento

Usted puede conectar un cabezal pequeño de 0,8 cm², y uno grande de 5 cm² para el tratamiento de terapia de ultrasonido, y de esta forma cambiar cabezales de manera rápida.

Energía Eficaz

Suena a paradoja para una unidad cuyo objetivo principal es la transferencia de energía al cuerpo humano. Debido al modo de ahorro de energía, no hay ninguna pérdida de energía cuando el aparato no está en uso.

Compacto y de gran estilo

Una unidad muy compacta, pequeña y ligera de manejar y transportar. Al mismo tiempo de gran estilo y bonito, un equipo que merece la pena mostrar y enseñar.

Cabezal de Tratamiento - Valor añadido

Un cabezal inteligente, equipado de electrónica y cubierto con un almohadillado especial que lo hace suave y cómodo de usar.

DATOS DE PEDIDO

458338 – Sonopuls 190 con cabeza 5 cm²

508666 – Sonopuls 190 con cabeza 0,8 cm²

508665 – Sonopuls 190 con cabeza 5 y 0,8 cm²

ACCESORIOS STANDARD

3442929 (1) Gel de contacto, 1 botella de 250 ml

3444357 Cable conector de Red

416750 Manual de Instrucciones Sonopuls 190

ACCESORIOS OPCIONALES

3442929 Gel de contacto, botella de 250 ml, caja de 12

3442930 Gel de contacto, botella de 850 ml, caja de 12


3442931 Gel de contacto, bote de 5 lt.

3442932 Dispensador-set para bote de 5 lt.

509353 Carro móvil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencias de Ultrasonido:	1 y 3 MHz
Ultrasonido:	continuo y de pulso
Duty cycles:	100 Hz / 5, 10, 20, 33/, 50, 80%
Frecuencia de Pulso:	16 Hz, 48 Hz y 100 Hz
Intensidad:	0-2 W/cm ² continuo, 0-3 W/cm ² pulsado(2)
Número de conexiones US:	2
ERA US - aplicador grande:	5 cm ²
ERA US - aplicador pequeño:	0,8 cm ²
Protocolos pre programados:	25 protocolos – basados en evidencia y con apoyo gráfico.
Posiciones Programables:	20 posiciones
TFT –Pantalla Táctil:	480 x 272 pixels
Suministro de voltaje:	100-240 V ± 10% (50/60 Hz)
Dimensiones (wxdxh):	21 x 19 x 9 cm (cod. 1631-901) 21 x 19 x 9 cm (cod. 1631-902) 28 x 19 x 9 cm (cod. 1631-903)
Peso:	760 gr 760 gr 838 gr

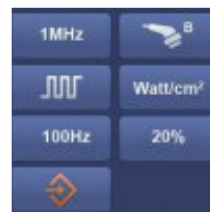

al Servicio de la Salud



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17
e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.enraf.es